



Auri™ D4 and D16 Docking Station Quick Start Guide



Docking Station 4
Auri-D4




Docking Station 16
Auri-D16



Docking Station Case 16
Auri-DC16



Intelligent Cable Management Unit
LA-382

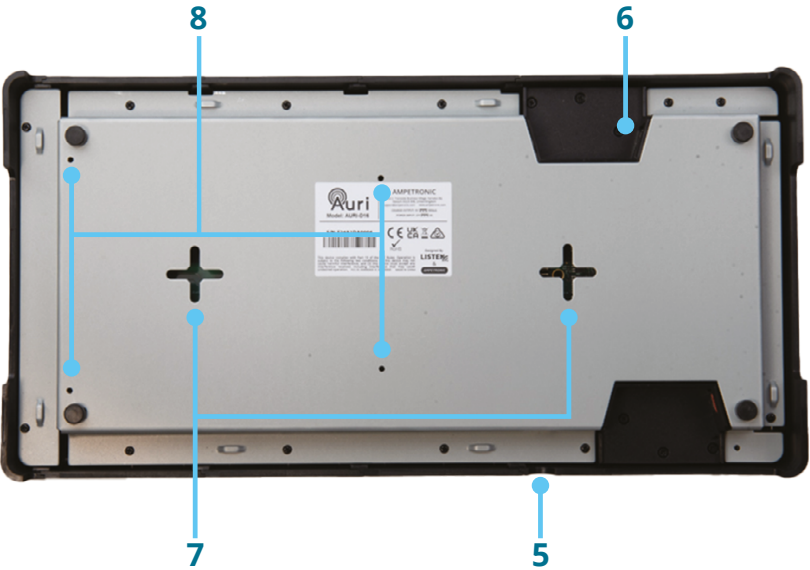

1. Tlačidlo Kopírovať
2. Kopírovanie LED
3. Stavová LED dióda
4. Stavové tlačidlo
5. Napájací konektor
6. Sieťový konektor
7. Otvory na montáž na stenu
8. Držiaky LA-382

Nastavenie a nabíjanie

1. Dokovaciu stanicu umiestnite na rovný povrch alebo pult. Dokovaciu stanicu možno tiež namontovať na stenu alebo iný povrch pomocou otvorov na montáž na stenu (AURI-D4 a AURI-D16).
2. Pripojte dokovaciu stanicu do elektrickej zásuvky pomocou dodaného napájania.
3. Vložte prijímače Auri™ do nabíjacích vreciek. Stav hornej LED prijímača (prijímačov) bude blikaním signalizovať, že sa batéria nabíja, a po úplnom nabití sa rozsvieti.

Poznámka: Nezatvárajte puzdro dokovacej stanice, keď je pripojená k napájaniu! Puzdro musí zostať otvorené, aby sa zabezpečilo správne vetranie počas nabíjania (AURI-DC16).

Základná prevádzka

Stavové tlačidlo - Stlačením stavového tlačidla rozsvietite displeje všetkých prijímačov a zobrazíte stavové informácie.

Tlačidlo Kopírovať - Chvilkovým stlačením sa skopíruje knižnica názvov vysielania a šifrovacích kľúčov z dokovacej stanice do všetkých dokovaných prijímačov, červená LED počas tohto procesu pomaly bliká. Dlhým stlačením sa skopírujú názvy vysielania, šifrovacie kľúče a konfiguračné nastavenia prijímača z dokovacej stanice do všetkých dokovaných prijímačov, červená LED počas tohto procesu rýchlo bliká. Podržaním tlačidla dlhšie ako 5 s sa operácia zruší, červená LED zhasne, čo znamená, že sa nevykoná žiadna akcia.

Poznámka: Na konfiguráciu názvov vysielania, šifrovacích kľúčov a nastavení prijímača uložených v dokovacej stanici je potrebný softvér Auri™ Manager. V predvolenom nastavení budú všetky názvy vysielania a šifrovacie kľúče prázdne a nastavenia prijímača budú zodpovedať predvoleným nastaveniam prijímača z výroby.

LA-382 – Inteligentná jednotka na správu káblov

Na pohodlné uloženie slúchadiel, reproduktorov do uší, slučiek na krk a ďalšieho príslušenstva je k dispozícii jednotka na správu káblov (k dispozícii len pre AURI-D16).

Softvér Auri™ Manager

Softvérová aplikácia Auri™ Manager je potrebná na vykonanie akýchkoľvek zmien nastavení na dokovacej stanici a na zobrazenie a správu dokovaných prijímačov.

1. V obchode Microsoft ® Store vyhľadajte aplikáciu „Auri™ Manager“ a nainštalujte ju.
<https://www.microsoft.com/store/productId/9NRJLR0V9QXH>
2. Pripojte dokovaciu stanicu k počítaču pomocou jedného sieťového kábla alebo ich oba pripojte k rovnakej existujúcej sieti.
3. Otvorte aplikáciu Auri™ Manager a skontrolujte, či je dokovacia stanica viditeľná v zozname zariadení; pri priamom pripojení to môže trvať približne 2 minúty po pripojení a zapnutí dokovacej stanice.
4. Kliknite na dokovaciu stanicu a zadajte prihlasovacie údaje, ktoré chcete pre zariadenie použiť, potom zadajte predvolené prihlasovacie údaje, ako sú uvedené na štítku zariadenia.
5. Pomocou softvéru môžete aktualizovať firmvér dokovacej stanice a prijímača, upraviť nastavenia prijímača, napríklad predvolenú hlasitosť, a spravovať knižnicu známych názvov vysielania a šifrovacích kľúčov.

Úplné informácie o starostlivosti a používaní nájdete na webovej lokalite Auri™, kde si môžete stiahnuť príručku systému Auri™ a podporný softvér Auri™ Manager. www.auriaudio.com



Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého třída 19/114
612 00 Brno

Email: info@unb.cz

Hlasový telefon: (+420) 541 245 321

Hlasový telefon nebo SMS: (+420) 725 605 216

www.pomuckyproneslysici.cz

AMPETRONIC

AMPETRONIC Unit 2, Trentside Buisness Village, Farndon Road, Newark NG24 4XB,
United Kingdom | **Phone:** +44.1636.610062 **www.ampetronic.com**

LISTEN
TECHNOLOGIES

LISTEN TECHNOLOGIES 14912 Heritage Crest Way, Bluffdale, Utah 84065-4818
USA | **Phone:** +1.801.233.8992 **Toll-Free:** 1.800.330.0891 **www.listentech.com**

The Bluetooth ® word marks and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Listen Technologies and Ampetronic are under license. Audinate®, the Audinate logo and Dante® are registered trademarks of Audinate Pty Ltd. Other trademarks are trade names of their respective owners. Windows ® is a trademark of the Microsoft ® group of companies.

20241017 | UP1B603-2