

Řešení potíží

pokud	Zkuste
Blikají LED diody červeně	Úroveň baterie je nízká. Nabijte Vibio pomocí přiloženého kabelu.
LED diody nesvítí	Baterie jsou vybité, nabijte Vibio asi 1.5 hodiny.
Vibio se nepřipojí k mému mobilu	Začněte kontrolou připojení Bluetooth na domovské obrazovce aplikace. Pokud je ikona Vibio červená a přeškrtnutá, zkuste následující: 1 Pohybně se v dosahu. Přesuňte svůj mobil blíže k Vibio. 2 Vypněte a zapněte Bluetooth. Přejetím otevřete Ovládací centrum / Panel rychlého nastavení na vašem mobilu a klepněte na ikonu Bluetooth. Pokud stále nefunguje, musíte polštářek a aplikaci Vibio resetovat a znovu připojit ručně. Zkuste následující: 1 Vynutit ukončení aplikace. Všimněte si, že to nestačí pouze zavřít. 2 Odpojte Vibio. Přejděte do Nastavení > Bluetooth. Klepněte na ⓘ/⚙️ a zařízení "Vibio" odpojte. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto. 3 Resetujte Vibio. Zatáhněte a podržte femínek, dokud začnou LED diody blikat. Uvolněte a znovu zatáhněte, dokud LED nezačnou modře blikat. 4 Nastavte Vibio. Znovu spusťte aplikaci Vibio a postupujte podle pokynů.

Postup

Osobní vibrační alarm pro použití s mobilním telefonem pro vzbuzení

Napájení a baterie

Napětí baterie: 1 x 3.7V A Lithová-iontová
Spotřeba baterie: Aktivní se silnou vibrací: < 1000 mA, Idle: < 100 µA Doba provozu: Až 10 dní / doba nabíjení: Až 1.5 hour @ 500mA
Nabíjecí prou: Až 500 mA, 5V DC

Kompatibilita

iOS11 / Android 4.4 a vyšší
iPhone 5s a vyšší
Moderní Android

Rozměry a hmotnost

Velikost: 27 x 94 x 94 mm, 1,1 x 3,7 x 3,7"
Váha: 153 g, 5,4 oz.

Frekvence a pokrytí

Bluetooth frequency: 2402 – 2480 MHz
Výstupní výkon: Max 2.5mW (4dBm)
Pokrytí: až 30 m v otevřeném prostoru.
Konektivita: Bluetooth 4.2

Cabely a připojení

Délka kabelu: 1 m,
Konektor: USB type A to USB Micro-B

Údržba a čištění. Čistěte suchým hadříkem. nepoužívat chemické prostředky aerosolový spray, alkohol nebo abraziva.

Požadavky na předpisy

Vyhovuje CE, RCM, BQB, RoHS, WEEE, Der Grüne punkt

Požadavky na prostředí

Pro vnitřní použití
Teplota: 0°– 35° C, 32°– 95° F
Relativní vlhkost: 5% – 95%

Bezpečnostní podmínky

Viz samostatná složka

Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30, 436 32 Askim, Sweden. Phone +46 31 68 28 20
E-mail info@bellman.com
© and TM 2019, Bellman & Symfon AB, všechna práva vyhrazena

BE1221_019ANNO2




Co budete potřebovat?

- Mobilní telefon od iOS11 / Android 4.4 nebo výše.
- USB adaptér

Co je obsahem balení?

- 1 Napájecí kabel
- 2 Vibio vibrační polštářek

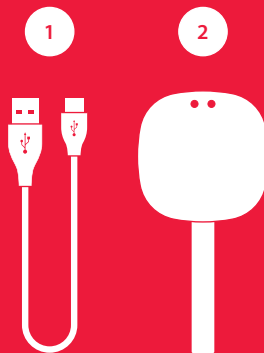

Vibio vibrační polštářek, BE1221

Česky

Co znamenají blikající LED světla?

- Bílá znamená, že je aktivován Alarm nebo, že komunikuje s mobilem.
- Modrá znamená, že je připraven ke spárování.
- Zelená znamená, že se nabíjí.
- Žlutá znamená, že máte příchozí hovor nebo zprávu.
- Červená znamená, že úroveň baterie je nízká.




Instalace Vibio polštářku

1 Aktivace napájení

Připojte nabíjecí kabel k Vašemu Vibio a zapojte USB konektor do napájecího adaptéru nebo USB zásuvky na počítači.

2 Zapněte

Posuňte vypínač On/Off doprava a podržte Vibio v blízkosti svého mobilu.

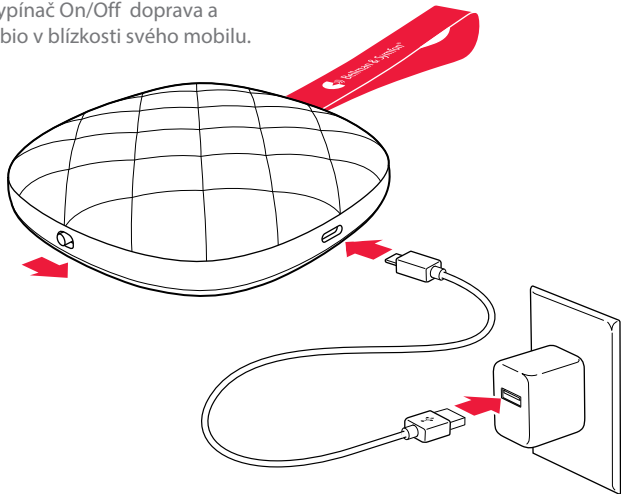

3 Instalace aplikace



Stáhněte **Vibio** app App Store® nebo Google Play™ a sledujte instalační návod.



Použití app

Nastavení budíků



Přidat. Klepnutím na tlačítko plus přidáte nový budík.



Editace. Klepnutím na tlačítko tužka upravíte čas budík.



Vymazat. Klikněte na tlačítko mínus smažte budík.



On/Off. Kliknutím na ON nebo OFF aktivujete nebo deaktivujete budík.

Sledování Vibio



Připojení. Vibio ikona ukazuje stav spojení.



Baterie. Ikona baterie ukazuje aktuální úroveň baterie.

Další



Pomoc. Klikněte na Menu /nabídka > Pomůže Vám více jak pracovat s aplikací.

